

COVID-19快速即时检测试剂盒


COVID-19 Rapid Point-of-Care Test Device

鼻腔拭子样本自我采集说明

在开始之前，请阅读以下说明。


为检测做准备

1. 如果鼻塞，可轻轻擤一下鼻腔。洗手。
2. 将以下各件用品拿出来：1条拭子、1个试剂盒、1条管子、1个蓝色盖子、缓冲溶液、纸架（或用干净的杯子）。找个计时器。将管子放入架/杯中。将蓝色盖子放在干净的表面或纸巾上。
3. 打开缓冲溶液瓶，将溶液挤入管子里，直至达到水位线。将管子放入纸架/干净的杯中。
4. 将缓冲溶液瓶盖重新盖上，然后将瓶子放回用品包那里，以备日后使用。

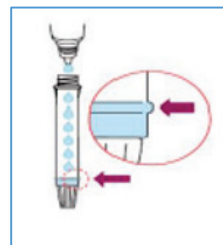


做检测

5. 打开鼻拭子包装，然后取出拭子。不要触碰它的棉签头。
6. 头微微向后倾斜。将拭子的棉签头插入一侧鼻腔内2至3厘米，或在可忍受的范围内尽可能深地插入。微微张大鼻孔，会有助于使拭子的插入变得不那么难受。如果是孩子，将拭子插入鼻腔内大约1至1.5厘米，则不会难受。
7. 将拭子顶端压向鼻腔的内壁，然后将拭子贴鼻腔内壁转动（打圈）5次。
8. 轻轻将拭子拿出来，然后插入另一侧鼻腔。重复5次完整的旋转。
9. 将拭子从鼻腔中取出，然后放入打开的管子中。

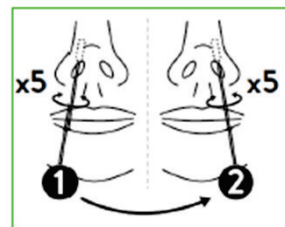


处理检测

10. 将拭子放在管子内，棉签头在底部。棉签头将浸入溶液中。
11. 轻轻地将拭子混入溶液中并打转。用力将拭子压向管子5次。设法不要产生泡沫。
12. 将拭子向上拉至管子的中部，然后用手指拈住，轻轻挤压。
13. 用力将拭子压向管子内壁，从而折断拭子末端。折断末端时，要紧握拭子。
14. 让拭子留在管子内，将蓝色盖子盖紧管子。
15. 如果多人同时进行检测，请用个人姓名的首字母标记管子。
16. 拭子和溶液现在已经制成了可供检测的样本。最好马上做检测。如果需要，样本可在室温下存放2小时。可将管子放入架子或家用杯子中，保持直立，直至您准备好开始检测。
17. 从包装中取出试剂盒。
18. 如果多人同时进行检测，请用个人姓名的首字母标记试剂盒。

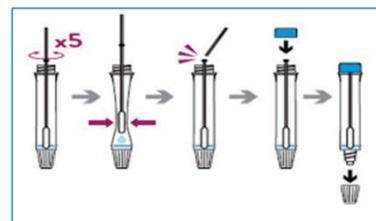


19. 将试剂盒放在平坦、稳固的表面上，并让它一直在那里，直到检测完成。
20. 拿起正确的管子（如果多人同时检测），然后将底部的白色/透明盖子拿掉。它会有根滴管，样本就是从这里滴入试剂盒的。
21. 在试剂盒上方约一英寸的地方，竖直持握管子，然后挤5滴到圆槽中。
22. 将白色盖子重新盖回到管子底部，然后丢入生活垃圾中。
23. 在计时器上设置15分钟。结果将在15分钟计时结束时呈现。您必须在接下来的5分钟之内读取检测结果。

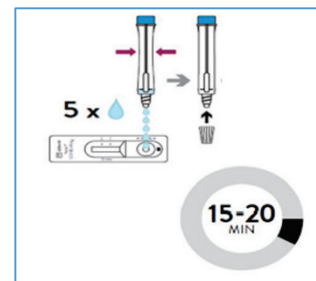


读取检测结果

24. 试剂盒有一条标有“C”的控制线，以帮助确保试剂盒工作正常。还有一个标记为“T”的检测线，检测结果会在那里显示出来。
25. 有3种可能的结果：阳性 - 您可能感染了 COVID-19；阴性——您可能没有感染 COVID-19；无效，此检测未正常工作，未能检测到COVID-19。您会在试剂盒上看到的：



- **阴性：**当只有控制线出现时，结果为阴性。您可以接着进行步骤26。请记住要在3-4天后再次检测。

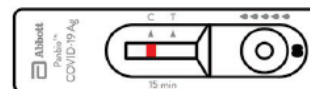

- **阳性：**当控制线和测试线都出现时，结果为阳性。即使检测线隐约可见，仍表示结果为阳性。请记住，作为一种及早筛查的手段，阳性检测结果并不能确诊您感染了COVID-19。如果测试呈阳性，您必须立即在家/居住地隔离，并做出计划，尽快到COVID-19检测中心做确诊检测。**在知道检测结果前请耐心等待。如果是阳性，请继续自我隔离，公共卫生部门会跟进。如果是阴性，您可以终止自我隔离。**

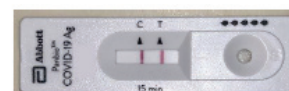

- **无效：**如果看不到控制线，则测试无效；即使有测试线出现也无效。这意味着检测有缺陷或操作不当。将试剂盒丢入生活垃圾中。查看说明，然后重新从步骤1开始操作。
如果连续两次检测都无效，请不要再做检测，要去COVID-19检测地点接受检测。

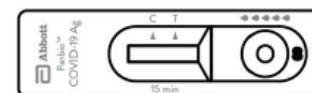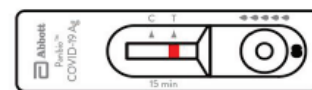

测试后的清理和后续

26. 清理检测区域。将管子和试剂盒丢入生活垃圾中。
27. 洗手或使用洁手消毒液。